


BELANGRIJKE MERIDIAANLIJNEN- EN PUNTEN WELKE MET DE MERIDIANBALL® TE BEHANDELEN ZIJN

- verzorging van ons lichaam
- preventief tegen ziekten/degeneratie
- elasticiteit van ons lichaam behouden

De intensiteit van het kloppen van de meridianen aanpassen aan je eigen behoefte. De bedoeling is een aangenaam en ontspannen gevoel te ervaren. Intensievere kloptechnieken en kennis betreffende het kloppen zijn te vinden in het handboek van de Meridianball®, uitgegeven door Prof. H.c. Sui QingBo. Hiervoor zijn ook workshops te volgen. Het meridiaankloppen is een methode, welke in de kloosters in China al door de Taoïsten is ontwikkeld als middel ter verzorging van het lichaam. De keizer uit het oude China, werd om lang te kunnen leven, behandeld met de meridiaanklopper.

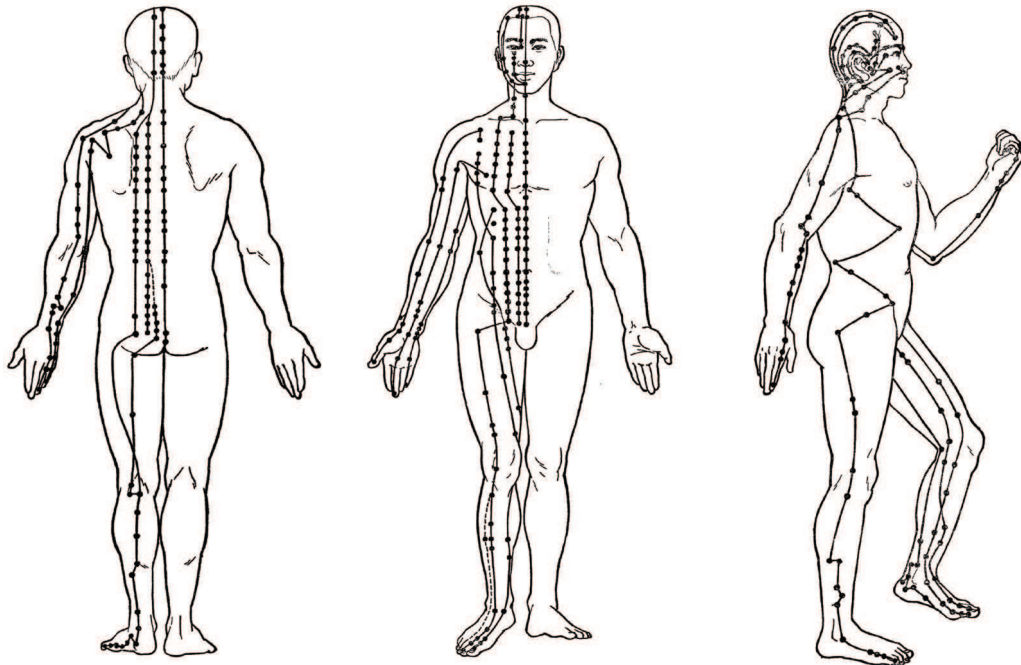

Pas later werd deze methode vanuit de Chinese geneeswijze ingezet en gecombineerd met de TuiNa massage (klassieke acupressuur) en met de QiGong. In de loop van de tijd werden er steeds meer behandelingstechnieken ontwikkeld. B.v. voor de basis-verzorging van ons lichaam, chronische ziekten, hoge bloeddruk, hartklachten, spijsverteringsproblemen, spier- en gewrichtspijnen, rugproblemen en spanningsproblemen. Het gebruik van de Meridianball® is gebaseerd op de principes van de TCM, met name de meridiaan-theorie. Met de balvormige kant (bal) wordt licht en ritmisch over de lichaamsdelen en de meridianen geklopt, dit om de levensenergie (Qi) te versterken en de fysiologische functies van onze organen te harmoniseren. Met de spitse punt van de Meridianball® (punt) kan men een specifiek punt behandelen. Om de Meridianball® goed te kunnen gebruiken is een goede grip van de Meridianball® belangrijk. Om de spieren te verzorgen klopt men deze tot de eigen grens, welke goed te verdragen is. Zo worden onze meridianen geactiveerd en verbetert de kwaliteit

van ons bloed, daarmee ook onze levensenergie. Na behandeling kan een lichte spierpijn optreden, gevolgd door een aangename lichaamswaarneming. De behandeling is zonder bijverschijnselen en regelmatig gebruik bevordert de vitaliteit van het lichaam en de geest. "Het ouder worden van de mensen begint bij de benen" is een oud Chinees gezegde. Daarom is het voor ouderen bijzonder geschikt om dagelijks de benen en de buik te kloppen.



Meridianball®

MANUEEL MASSAGE APPARAAT ONTWIKKELD
VANUIT PRINCIPES VAN DE TRADITIONELE CHINESE
GEZONDHEIDSLER DOOR PROF. H.C. SUI QINGBO.

DAGELIJKS KLOPPEN VOLGENS HET
MERIDIAANSYSTEEM BEVORDERT
ONZE VITALE FUNCTIES!



Doel van de Meridianball® en gebruiksaanwijzing hiervan

De Meridianball® is een apparaat ter stimulering en activering van meridiaanpunten en voor gerichte massage van gespannen spieren.

Heeft u twijfels met het gebruik van dit apparaat, vraag dan advies aan een Orthopedische arts of een arts uit de Trad. Chin. Geneeswijze.

Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de bal zorgvuldig door! Gebruik het apparaat enkel voor datgene waarvoor het bestemd is!

Laat het apparaat niet binnen het bereik van kinderen liggen. Het is niet geschikt voor kinderen of personen met beperkte mogelijkheden om dit zonder toezicht te gebruiken! Het mag enkel door personen gebruikt worden, die zich in de positie bevinden deze Meridianball® met zekerheid te gebruiken .

Kinderen, ouderen en of mensen met een beperking mogen deze Meridianball® niet zonder toezicht gebruiken.

Bij zwangerschap zorgvuldige voorzorgsmaatregelen nemen en de eigen belastbaarheid in de gaten houden, of het gebruik van de Meridianball® met eigen arts bespreken.

Bewaar de Meridianball® in een droge omgeving. Het is niet beschermd tegen het indringen van vocht. Houd het apparaat ook uit de stralen van de zon, erge hitte of erge kou!

Reiniging en desinfecteren

Omdat deze Meridianball® vaak in aanraking met de huid komt, moet deze regelmatig gedesinfecteerd worden. Het apparaat is niet waterdicht!

Vermijd ook het apparaat volledig in vloeistof onder te dompelen. Neem het af met een doek bevochtigd met desinfecteermiddel voor plastic, rubber en hout.

Verpakkingsmateriaal

Houd de plastic verpakking uit de buurt van kinderen! Plastic zakken kunnen tot verstikking leiden!

Voorzichtigheids-maatregelen bij ziekten

De Meridianball® mag bij onderstaande ziekten niet gebruikt worden!

Tuberculose / goedaardige- en kwaadaardige tumoren / huidproblemen / aderproblemen /inwendige bloedingen / trombose / open wonden / bloeduitstortingen / spataderen / onbestemde kuit- of gewrichtsproblemen. Gebruik de Meridianball® ook niet als lichaamsdelen verdoofd zijn / of wanneer er een chirurgische ingreep zal plaatsvinden! Als er medische vragen ten aanzien van het gebruik van de meridiaanbal zijn, stel uzelf dan in verbinding met uw arts!


Garantie

Er is een garantie van 1 jaar na datum van aankoop. Dit product wordt vanuit de nieuwste fabricagemethode gemaakt en aan uitgebreide kwaliteitscontrole onderzocht. Wij garanderen de onberispelijke hoedanigheid van dit artikel. Binnen de garantieperiode zullen wij kosteloos problemen herstellen. Zullen zich opnieuw onverwachte gebreken voordoen, stuur dan dit artikel zorgvuldig verpakt aan onze klantenservice retour. Om uw klacht zorgvuldig te behandelen, vragen wij u een omschrijving van uw klacht erbij in te sluiten.

Niet onder garantie vallen die problemen die onder onzorgvuldig behandelen vallen zoals b.v. kapotte aansluitingsstukken. Ook slijtage valt niet onder garantie.

TECHNISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

- LxHxB: 425x125x70mm
- De gebruikte materialen zijn getest onder standaard ISO-9001.

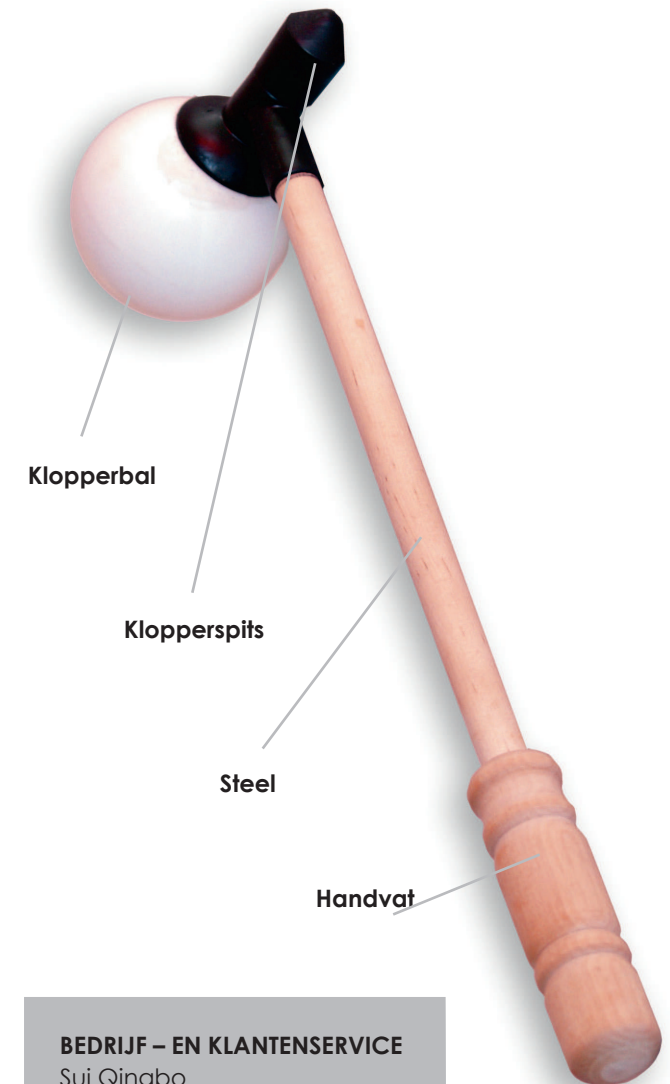

BEDRIJF – EN KLANTENSERVICE

Sui Qingbo
Lebenspflege-Artikel-Handel
Diekbarg 20a
22397 Hamburg - Germany
www.lebenspflege.de
shop@lebenspflege.de